

gamme de

Trocarts

VECTEC
DISPOSITIFS
ENDOSCOPIQUES
A USAGE UNIQUE

Trocart
12 100




Trocart
12 100H



Trocart
12 060H



Trocart
5 100

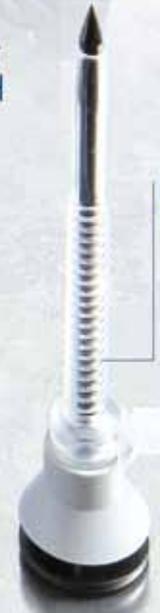

Trocart
5 068



Trocart
12 060



Trocart
5 053



VECTEC

GAMME DE TROCARTS À USAGE UNIQUE

Référence	Diamètre	Longueur utile
5 053	5,5 mm	53 mm
5 053H	5,5 mm	53 mm
5 053T	5,5 mm	53 mm
5 068	5,5 mm	68 mm
5 100	5,5 mm	100 mm
11 100S*	11 mm	100 mm
12 060	12 mm	60 mm
12 060H	12 mm	60 mm
12 100	12 mm	100 mm
12 100H	12 mm	100 mm

* avec bouclier

Sécurité : les trocarts VECTEC sont fabriqués en polycarbonate et ne contiennent aucune partie métallique conductrice.

Transparence : les canules transparentes VECTEC permettent un contrôle visuel à chaque étape chirurgicale.

Stabilité : excellente tenue perpendiculaire dans la paroi abdominale grâce à la légèreté du trocart et au pas de vis progressif.

Atraumatique : la pointe de forme semi conique assortie d'une arête latérale minimise les lésions tissulaires avec une performance chirurgicale optimale.

Ergonomique : la forme conique de la tête du trocart guide l'instrument lors de l'introduction, en ne mobilisant qu'une seule main.

Economique : les trocarts VECTEC sont l'alternative économique et concurrente des trocarts conventionnels.

Environnement : les trocarts Vectec sont totalement recyclables.

Les trocarts VECTEC sont livrés dans un blister rigide et sont stérilisés à l'ETO selon les standards de la norme NF EN ISO 11135-1.

Conditionnement : unitaire par boîte de 25.

DM Classe IIa

Fabrication française

Brevet US n°6-168-607



REF : 11 100 S



REF : 5 053, 5 068, 5 100



REF : 12 060, 12 060H, 12 100, 12 100H



VECTEC

Bioparc - Vichy Hauterive
03270 Hauterive
FRANCE

Tél : +33 (0)4 70 58 41 70
FAX : +33 (0)4 70 58 41 79
Email : vectec@vectec.fr
<http://www.vectec.fr>